

**Használati utasítás****Bite Rim Stick****【Használati utasítás】**

1. Vágja ezt a terméket tetszőleges hosszúságúra, és ragassza rá az intraorális munkamodellre.
2. A műfogak elrendezése előtt helyezzen próbaprotézist a páciens szájüregébe, és határozza meg a fogak magasságát és helyzetét.
3. Készítsen viaszfogsort az általános gyakorlatnak megfelelően.

**【Vigyázat】**

1. Ezen anyag elégetésekor helyi elszívőrendszert, szellőzőventilátort stb. kell felszerelni, és kerülni kell a zárt helyiségben történő munkavégzést. Ne lélegezze be az égetés során keletkező füstöt és gőzt.
2. Ha bármilyen probléma, például idegen anyagok keverednek az anyag használata előtt vagy közben, hagyja abba a használatát.
3. Ha ezt az anyagot használja, legyen óvatos, nehogy megégesse magát.

**【Fontos megjegyzés】**

1. Ne használja olyan betegeknél, akik túlérzékenyek erre az anyagra, mint például kiütések vagy bőrgyulladás.
2. Az a felhasználó, akinek kiütése, bőrgyulladása vagy egyéb túlérzékenysége van ezzel az anyaggal szemben, viseljen kesztyűt, és kerülje az anyaggal való közvetlen érintkezést.
3. Azoknak a betegeknek, akiknél az anyag használata miatt túlérzékenységi tünetek, például kiütés, ekcéma, bőrpír, fekély, duzzanat, viszketés és zsibbadás jelentkezik, abba kell hagyniuk a használatát, és orvoshoz kell fordulniuk.
4. Annak a felhasználónak, akinél az anyag használata miatt túlérzékenységi tünetek, például kiütés, ekcéma, bőrpír, fekély, duzzanat, viszketés vagy zsibbadás jelentkezik, abba kell hagynia az anyag használatát, és orvoshoz kell fordulnia.
5. Tájékoztassa a felhasználókat és a betegeket, hogy az eszközzel kapcsolatos minden súlyos balesetet jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó vagy a beteg lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságainak.

**【Tárolás】**

- Hűvös, sötét helyen tárolja.
- Ne hagyja a terméket meleg helyen (pl. tűzhely közelében vagy közvetlen napfényben).
- A használati és tárolási területet fel kell szerelni tűzoltó rendszerrel.
- Tárolja olyan helyen, ahol tűz szigorúan tilos, és ne tárolja nagy mennyiségben egy tárolóhelyen.
- A tárolás és szállítás során kerülje a közvetlen napfényt.
- Megfelelően tárolja és kezelje úgy, hogy csak az arra felhatalmazott személyzet férhessen hozzá.

**【Lejáratidő】**

Nincs határozott lejárati idő, de a gyártástól számított 10 éven belül fel kell használni.

**【Az ártalmatlanítással kapcsolatos információk】**

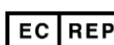
A fennmaradó készleteket a megfelelő nemzeti jogszabályi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

**【Potenciális veszély】**

Ez a termék allergiás reakciókat, például kiütéseket és bőrgyulladást okozhat.

**【Gyártó:】**

 **YAMAHACHI DENTAL MFG. CO.**  
54-1 Ochigara, Nishiura-Cho, Gamagori, Aichi-Pref, 443-0105, JAPAN  
Tel: (+81) 533-57-7121 / Fax: (+81) 533-57-1764  
E-mail: box@yamahachi-dental.co.jp;  
Web: www.yamahachi-dental.co.jp

 **OBELIS S.A**  
Bd. Général Wahis, 53, 1030 Brussels, Belgium