

PMMA DISK, PMMA BLOCK Akrilgyanta a fogászati CAD/CAM technológiához

[Basic UDI-DI] PMMA DISK: ++D08061718PD9LV PMMA BLOCK: ++D08061718PM9MQ

【Rendeltetésszerű használat】 A PMMA DISK és PMMA BLOCK akrilgyanta anyagok CAD/CAM marógépekhez.

【Felhasználási javaslat】 Az indikációk a következők: műteti vezetők, sín, sín, műfogsor alap, korona, híd.

【Tervezett népesség】 Olyan személyek, akiknek a természetes fogai valamilyen betegségben szenvednek, például szuvas vagy hiányzó fogakkal.

【Rendeltetésszerű felhasználó】 Fogorvosok vagy fogtechnikusok, akik fogpótlást készítenek.

【Ellenjavallatok】 Ne használja az MMA-ra allergiás betegeknél.

【Várható klinikai előnyök】 Számítson arra, hogy végre képes lesz megrágni az ételt.

【Teljesítményjellemzők】 Hajlításierősség: $\geq 65\text{MPa}$, hajlító modulus: $\geq 2000\text{MPa}$, vízszorpció: $\leq 32\mu\text{g/mm}^3$,

Oldhatóság: $\leq 1,6\mu\text{g/mm}^3$, Maradék MMA: $\leq 2.2\%$

【Tájékoztatás azokról az anyagokról, amelyeknek a betegek ki lehetnek téve】 PMMA, MMA, pigmentek és mások.

Ezeknek az összetevőknek az elúciója kevesebb, mint $1,6\mu\text{g/mm}^3$.

【SSCP】 Feltöltésre kerül az EUDAMED-be.

【Használati utasítás】

- Készítse el a gipszmodellt. Ha szükséges, készítse el a viaszmintát.
 - Ezt az orvostechnikai eszközt csak képzett személyzet kezelheti.
- Szkennelje be a modellt a használt CAD/CAM-rendszernek megfelelő szkennelvel. Szükség esetén szkennelje be a viaszmintát.
- A CAD/CAM-rendszernek megfelelő tervezőszoftverrel tervezze meg a protetikai restaurációt a szkennelt adatokból.
- Helyezze ezt az elemet a CAD/CAM marógépbe. Vágja ki ezt az anyagot a tervezett adatok alapján.
- Távolítsa el a vágott anyagot, és távolítsa el a vágási hulladékokat levegővel vagy kefével stb.
- Polírozza ki az élezett anyagokat.
- A műfogsoralapban a műfogakat ragasztóanyaggal helyezik fel.
 - Kövessen a kötőanyag használatára vonatkozó utasításokat.
- Tisztítás ultrahangos fürdővel, enyhe tisztítószerrel.

【Vigázat】

- Használjon megfelelő CAD/CAM rendszert.
- A vágást a használt CAD/CAM rendszer utasításainak megfelelően kell elvégezni.

(Korona, híd)

- Mély ferde vagy vállas kialakítással úgy, hogy a peremszelvény vastagsága legalább 0,5 mm legyen.
- Az üreg külső formájának lekerekítenek kell lennie, és nem érintkezhet a szemben lévő foggal.
- Úgy kell kialakítani és megtervezni, hogy a hasadék legalább 1,0 mm vastag legyen, az okkluzális csúcs pedig legalább 1,3 mm vastag.
- Ha további felhordásra kerül sor, a felhordást a friss felületre kell felhordani.
- Szükség esetén pulpavédelmet kell alkalmazni, ha az üreg mély és közel van a pulpához.

【Megjegyzés】

- Annak érdekében, hogy a por ne érje az emberi testet, a termék polírozási munkálatai során védőszemüveget, helyi porelnyelőt vagy engedélyezett intézmény által jóváhagyott porálló maszkot kell használni.
- A korona felhelyezésekor megfelelő ragasztóanyagot (pl. ideiglenes cementet) kell használni.
- A korona felhelyezésekor távolítsa el a felesleges cementet.
- Azoknak a betegeknek, akiknél az anyag használata miatt túlérzékenységi tünetek, például kiütések, ekcéma, bőrpír, fekély, duzzanat, viszketés és zsibbadás jelentkezik, abba kell hagyniuk a használatát, és orvoshoz kell fordulniuk.
- Az MMA-alapú monomerekkel szembeni túlérzékenységben, például kiütésekben és bőrgyulladásban szenvedő operátorok ne érintsék közvetlenül kesztyűvel az anyagot.
- Ha a kezelők túlérzékenységi tüneteket, például kiütést, ekcémát, bőrpírt, fekélyt, duzzanatot, viszketést és zsibbadást tapasztalnak az anyag használata miatt, hagyják abba a használatát, és forduljanak orvoshoz.
- Egyszeri használat: A megmunkálás után a fogpótlást nem lehet más páciensnél felhasználni, mert nem fog illeszkedni.

【Tárolás】

- Tartsa távol a magas hőmérséklettől, magas páratartalomtól és közvetlen napfénytől.
- Megfelelően tárolja és ellenőrizze, hogy ne férhessenek hozzá nem jogosult személyek.



【Az ártalmatlanítással kapcsolatos információk】

A fennmaradó készleteket vagy használt orvostechnikai eszközöket a megfelelő nemzeti jogszabályi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.


【Előállítás】



Tel: (+81) 533-57-7121 / Fax: (+81) 533-57-1764

E-mail: box@yamahachi-dental.co.jp;

Web: www.yamahachi-dental.co.jp

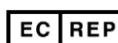

OBELIS S.A

Bd. Général Wahis, 53, 1030 Brussels, Belgium