

PMMA DISK, PMMA BLOCK Rășină acrilică pentru tehnologia dentară CAD/CAM

[Basic UDI-DI] PMMA DISK: ++D08061718PD9LV PMMA BLOCK: ++D08061718PM9MQ

【Utilizare preconizată】 PMMA DISK și PMMA BLOCK sunt materiale din rășină acrilică pentru mașinile de frezat CAD/CAM.

【Indicații de utilizare】 Indicațiile sunt: ghiduri chirurgicale, stenturi, atele, baze pentru proteze, coroane, punți.

【Populația vizată】 Persoane cu anumite afecțiuni ale dinților naturali, cum ar fi dinți cariati sau lipsă.

【Utilizatorul vizat】 Medicii dentiști sau tehnicienii dentari care confecționează proteze dentare.

【Contraindicații】 Nu se utilizează la pacienții alergici la MMA.

【Beneficii clinice de așteptat】 Așteptați-vă să puteți în sfârșit să mestecați mâncarea.

【Caracteristici de performanță】 Rezistența la flexiune: $\geq 65\text{MPa}$, Modulul de flexiune: $\geq 2000\text{MPa}$, Absorbția apei: $\leq 32\mu\text{g}/\text{mm}^3$, Solubilitate: $\leq 1.6\mu\text{g}/\text{mm}^3$, MMA reziduală: $\leq 2.2\%$

【Informații privind materialele la care pot fi expuși pacienții】 PMMA, MMA, pigmenți și altele.

Eluția acestor componente este mai mică de $1.6\mu\text{g}/\text{mm}^3$.

【SSCP】 Aceasta va fi încărcată în EUDAMED.

【Instrucțiuni de utilizare】

- Faceți modelul din ghips. Dacă este necesar, realizați modelul din ceară.
 - Manipularea acestui dispozitiv medical trebuie să fie permisă numai de către personalul instruit.
- Scanați modelul cu un scanner care corespunde sistemului CAD/CAM utilizat. Dacă este necesar, scanați modelul de ceară.
- Proiectarea restaurării protetice cu ajutorul unui software de proiectare care corespunde sistemului CAD/CAM din datele scanate.
- Așezați acest element în mașina de frezat CAD/CAM. Tăiați acest material folosind datele proiectate.
- Îndepărtați materialul tăiat și îndepărtați deșeurile tăiate cu ajutorul aerului sau al periei etc.
- Lustruiți materialele ascuțite.
- În cazul unei baze de proteză, dinții artificiali sunt instalați cu ajutorul unui agent de lipire.
 - Respectați instrucțiunile de utilizare a agentului de lipire.
- Curățarea prin baie cu ultrasunete cu un agent de curățare blând.

【Atenție】

- Utilizați un sistem CAD/CAM adecvat.
- Tăierea se efectuează în conformitate cu instrucțiunile sistemului CAD/CAM utilizat.

(Coroană, punte)

- Formată cu o șanfrinare sau un umăr adânc, astfel încât grosimea secțiunii marginale să fie de cel puțin 0,5 mm.
- Forma exterioară a cavității trebuie să fie rotunjită și să nu fie în contact cu dintele opus.
- Acesta trebuie să fie format și proiectat astfel încât să se asigure că fisura are o grosime de cel puțin 1,0 mm, iar vârful ocluzal are o grosime de cel puțin 1,3 mm.
- În cazul în care se aplică adaosuri suplimentare, acestea se aplică pe suprafața proaspătă.
- Protecția pulpară trebuie să fie folosită dacă este necesar în cazurile în care cavitatea este adâncă și aproape de pulpă.

【Notă】

- Pentru a preveni ca praful să afecteze corpul uman, în timpul lucrului de lustruire a acestui produs se vor folosi ochelari de protecție, un absorbant de praf local sau o mască antipraf aprobată de o instituție autorizată.
- La plasarea coroanei de restaurare trebuie utilizat un material adeziv adecvat (de exemplu, ciment temporar).
- Îndepărtați excesul de ciment atunci când puneți o coroană de restaurare.
- Pacienții care dezvoltă simptome de hipersensibilitate, cum ar fi erupții cutanate, eczeme, roșeață, ulcer, umflături, mâncărimi și amorțeală ca urmare a utilizării acestui material trebuie să întrerupă utilizarea și să consulte un medic.
- Operatorii cu antecedente de hipersensibilitate, cum ar fi erupții cutanate și dermatită la monomerii pe bază de MMA, nu trebuie să atingă materialul direct cu mânuși.
- În cazul în care operatorii prezintă simptome de hipersensibilitate, cum ar fi erupții cutanate, eczeme, roșeață, ulcer, umflături, mâncărimi și amorțeală ca urmare a utilizării acestui material, întrerupeți utilizarea și consultați un medic.
- O singură utilizare: Odată prelucrată, proteza dentară nu mai poate fi folosită pe un alt pacient, deoarece nu se va potrivi.

【Depozitare】

- A se păstra departe de temperaturi ridicate, umiditate ridicată și lumina directă a soarelui.
- Să le depoziteze și să le controleze în mod corespunzător, astfel încât să nu fie accesate de personal neautorizat.

**【Informații privind eliminarea】**

Stocurile rămase sau dispozitivele medicale utilizate trebuie eliminate în conformitate cu cerințele legale naționale corespunzătoare.


**【Fabricarea】**

54-1 Ochigara, Nishitara-Cho, Gamagori, Aichi-Pref, 443-0105, JAPAN

Tel: (+81) 533-57-7121 / Fax: (+81) 533-57-1764

E-mail: box@yamahachi-dental.co.jp;

Web: www.yamahachi-dental.co.jp

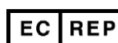

OBELIS S.A

Bd. Général Wahis, 53, 1030 Brussels, Belgium