

Инструкция за употреба**WAX DISK****【Указания за употреба】**

1. Изработване на восъчния модел: Следвайте инструкциите за работа с CAD/CAM машината.
2. Използвайте за леене.
 - Избягвайте бързото нагряване, когато използвате инвестиция от кристобалит.
[Препоръчителни условия]
 - (1) Повишаване на температурата от стайна температура до 250°C за 60 минути
 - (2) Поддържайте тази температура в продължение на 60 минути
 - (3) Повишаване на температурата до 700°C за 30 минути
 - (4) Поддържайте в продължение на 30 минути
 - Восъчните модели трябва да се поставят на определено разстояние един от друг (1 мм или повече).
 - Температурата в помещението трябва да бъде между 15°C и 25°C.
 - Остатък от изгаряне: Зелен, Син: няма
Слонова кост: 0.2%.

【Предупреждение】

1. Не изгаряйте този материал в затворено помещение. Не дишайте дима или парите, образувани при изгарянето, използвайте вентилатори, аспиратори и др. в помещението.
2. Преустановете използването на този материал, ако преди или по време на използването му се установи някакъв проблем. Например, чужд предмет е смесен с продукта.
3. Внимавайте да не се изгорите, когато оформяте този материал чрез топлина.

【Важна забележка】

1. Ако пациентът прояви каквито и да било симптоми на свръхчувствителност, спрете употребата на материала и незабавно се консултирайте с лекар.
2. Ако лаборантът прояви някакви симптоми на свръхчувствителност, спрете да използвате материала и незабавно се консултирайте с лекар.
3. Не използвайте при пациенти, които преди това са имали някаква хиперчувствителност, като обриви, дерматит или сърбеж с восък.
4. Лабораторните техници, които са имали някаква предишна хиперчувствителност, като обриви, дерматит или сърбеж вследствие на восъка, се съветват да използват ръкавици и да не докосват директно материала.
5. Уведомете потребителите и пациентите, че всички сериозни инциденти, свързани с изделието, трябва да бъдат докладвани на производителя и на компетентните органи на държавата членка, в която пребивава потребителят или пациентът.

【Съхранение】

- Съхранявайте при температура 50°C или по-ниска.
- Не оставяйте продукта на места, където температурата е висока (напр. в близост до печка или на пряка слънчева светлина).
- На мястото на употреба и съхранение трябва да бъде осигурена пожарогасителна система.
- Съхранявайте на места, където няма опасност от пожар, и не съхранявайте големи количества на едно място.
- Избягвайте пряка слънчева светлина по време на съхранение и транспортиране.
- Съхранявайте го правилно, така че да може да се използва само от стоматологичен персонал.

【Дата на изтичане на валидността】

Няма определен срок на годност, но трябва да се използва в рамките на 10 години от датата на производство.

【Информация за изхвърляне】

Останалите запаси трябва да бъдат унищожени в съответствие със съответните национални законови изисквания.

【Потенциална опасност】

Този продукт може да предизвика алергични реакции, като обриви и дерматит.

【Произведено от:】


YAMAHACHI DENTAL MFG. CO.

54-1 Ochigara, Nishiura-Cho, Gamagori, Aichi-Pref, 443-0105, JAPAN

Tel: (+81) 533-57-7121 / Fax: (+81) 533-57-1764

E-mail: box@yamahachi-dental.co.jp;

Web: www.yamahachi-dental.co.jp

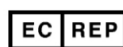

OBELIS S.A

Bd. Général Wahis, 53, 1030 Brussels, Belgium

