



山八齒材工業株式会社


Dental 3D Printer

SmaPri Sonic 4K LL

4K

高解像度出力で細部まで忠実に



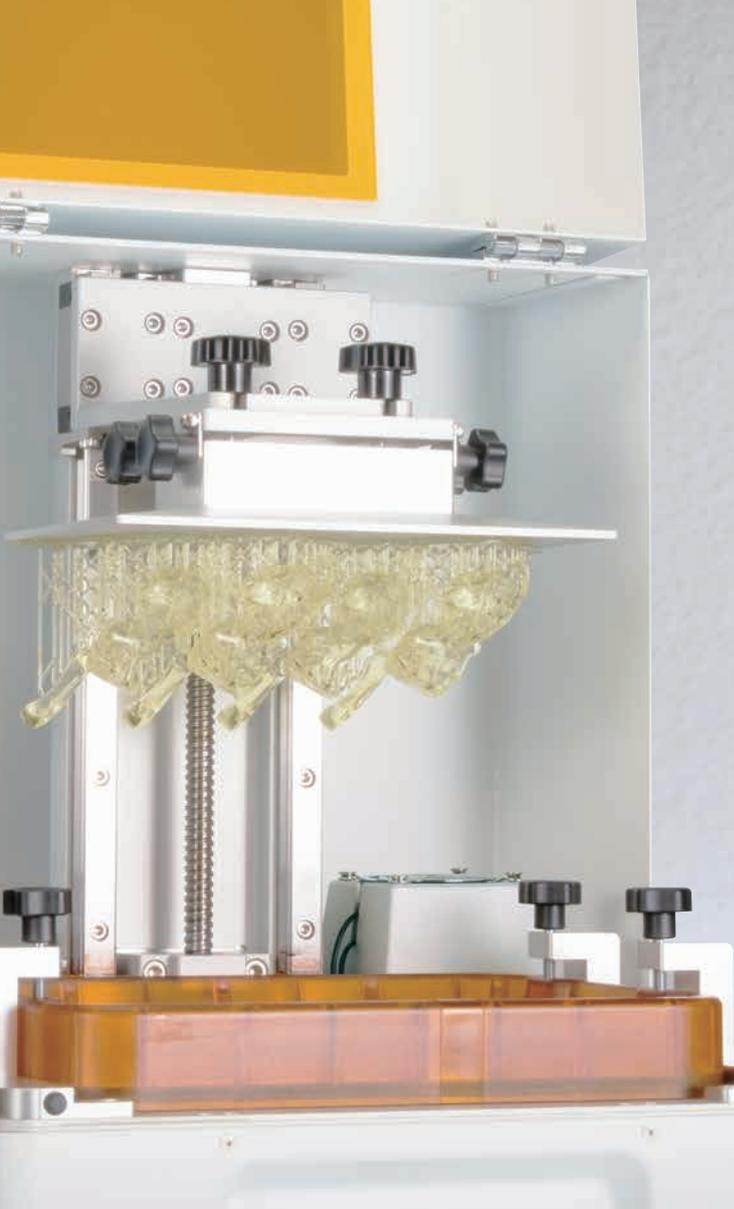

Dental 3D Printer SmaPri Sonic 4K LL

解像度140%UP[※]
優れた精度を実現
高速出力を可能に

日本の歯科向けに開発した材料を使用
模型・鑄造——今後さらに多種多様な製品を
製造可能となる新方式LCD方式 3Dプリンタで
デジタル技工の未来を切り開きます。

※従来品比較(2K→4K)

販売名:3Dプリンタ SmaPri Sonic 4K LL
歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット/
一般医療機器/医療機器届出番号:39B2X10004000048
製造販売元:有限会社サット・システムズ(医療機器製造販売業者)

3D-Printer Option

特性に合わせた3種の3Dプリンタ用材料です。

低コスト



SP-Model-EY モデル用

1kg/18,000円

模型製作を可能にする高強度とマウスピース成形用模型
に適した耐熱性を実現した低コスト材料です。

販売名:光硬化性樹脂材料 SP-Model-EY
届出番号:39B2X10004000054
類別:歯科材料08 歯科用石膏及び石膏こう製品
一般医療機器 歯科用樹脂系模型材
製造販売元:有限会社サット・システムズ

高温滅菌
可能



サージカルガイド・各個トレー・ベースプレート用 TrinDy DT-SG-160a サージカル

1kg/33,000円

サージカルガイド用生体適合性レジン、オートクレーブ対応で
材料を滅菌可能です。耐水性に優れた材料です。

販売名:TrinDy DT-SG-160a サージカル
届出番号:23B1X10001A58044
類別:機械器具58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント補綴用器具
製造販売元:山八歯材工業株式会社



Easy Remove システム

Easy Removeシステムなら
誰でも簡単にサポート部を除去できます。
道具も不要で、ケガの心配もありません。
是非動画でこの便利さをご覧ください。
(モデル・サージカル対応)



SmaPri Sonic 4K LL特別仕様

使いやすさにとことこだわり、工具を使わずにセッティングが可能なノブ式を採用。
工具不要のキャリブレーションを実現しました。
さらに特別仕様の大容量レジンバットを採用。
レジンバットはスライドして簡単に引き出せるのでレジンの処理もスムーズに行えます。

専用アプリケーション[Chi TuBox]付属

3Dデータを造形する際に必要な専用アプリケーション
推奨コンピュータ要件 CPU: Intel® Core i7 / RAM: 8GB以上

LCDを応用した3Dプリンタ原理

レジンバット真下にLCDパネル、更に下にUV LEDの構造で、
透過UVがレジンバット底面を照射し樹脂を硬化させます。



新しく開発した材料で従来のキャスト用材料より燃焼性をさらに向上しました。
クリストバライト埋没で casting ができヒートショックにも対応。
時間短縮が可能となりました。



燃焼性
UP

TrinDy DT-CM-220 キャスト


1kg / 34,000円

販売名: TrinDy DT-CM-220 キャスト
届出番号: 23B1X10001C03009
類別: 歯科材料03 義歯床材料
一般医療機器 歯科用パターンレジン
製造販売元: 山八歯材工業株式会社

Dental 3D Printer

SmaPri Sonic 4K LL

オープン価格

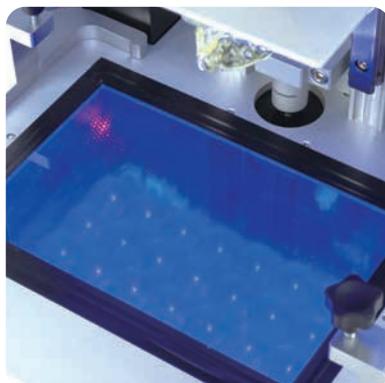

最大造形サイズ	W200×D125×H200mm	本体サイズ	約W330×D290×H470mm
積層ピッチ	10~300 μ m	本体重量	17.5kg
XY解像度	52 μ m	造形方式	LCD モノクロ4K
波長	405nm	電源	AC100V 50/60Hz

Support

導入後も安心の保守センドバック方式

故障した製品は販売店にご連絡・発送いただくと同時に代替品をお客様のもとへお届けいたします。

技術者の訪問も不要、設置操作も簡単な為スムーズに装置をご使用いただけます。

お客様の故意または過失による故障は別途費用を御請求させていただきます。

最大造形サイズ(実寸大)

(天板背景イメージが造形可能エリアになります)

製品仕様及び外観は、製品改良の為予告なく変更することがあります。

幅200mm

ご注文&お問い合わせは、お取引ディーラー様へご用命ください。

取扱店



山八歯材工業株式会社

〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1
TEL<0533>57-7121 FAX<0533>57-1764
E-mail box@yamahachi-dental.co.jp
<https://yamahachi-dental.co.jp>