

SINTER DIA BAR

シンターダイヤバー




一般医療機器
歯科技工用ダイヤモンド研削材
医療機器届出番号 11B3X10042000032

ダイヤモンド砥粒と金属粉を内部まで焼結しているため、長期間にわたり高い切削力を維持します。



電着

表面をダイヤモンド
砥粒でコーティング

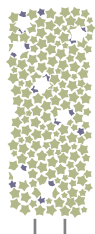

シンター

ダイヤモンド砥粒と
金属粉を内部まで焼結

3種類の粗さをラインナップし、ジルコニア、セラミックス、各種メタルまで幅広くご使用いただけます。



粗さ

コース



ミディアム



エクストラ
ファイン

製品情報

商品名 シンターダイヤバー
形態 #1
回転数 30,000rpm 以下
粗さ コース
ミディアム
エクストラファイン

標準価格

¥3,500 (税別)

製造販売元 | (同)WSPTジャパン 〒341-0024 埼玉県三郷市三郷1-20-18
TEL<048>954-5637



鹿 革

レースバフ

上質な鹿革を9枚重ね合わせた艶出し用バフです。
切り込みの厚みを増やして毛の広がりを抑えました。
固形研磨剤「タイガーマルチ」を併用することで良好な
研磨力が得られます。

研削材・研磨材

ニューセームポリッシャー

歯科用研磨器材 一般医療機器
医療機器届出番号 23B1X10001C09088

■仕様

規 格	φ90mm
包 装 単 位	1個 / ケース
標 準 価 格	¥1,500(税別)



特殊化学繊維ブラシ

レース用ブラシ

ファインドポリッシャーは特殊化学繊維ブラシを採用
しており、高い耐久性がございます。
また、作業部を短く密集配置することで、使用初期
からコシがあり、アクリルレジンからスルフォン樹脂
まで高い研磨力を発揮します。

研削材・研磨材

ファインドポリッシャー

歯科用研磨器材 一般医療機器
医療機器届出番号 23B1X10001C09085

■仕様

規 格	直径φ72mm(軸径33mm/作業部39mm) 2行のみ
最大回転数	6,000rpm
包 装 単 位	5個 / 袋
標 準 価 格	¥5,500(税別)

※ご注文＆お問い合わせは、お取引ディーラー様にご用命ください。
●ご用命は…



製造販売元

山八歯材工業株式会社

〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1

TEL(0533)57-7121 FAX(0533)57-1764

Home Page <http://www.yamahachi-dental.co.jp/>

E-mail box@yamahachi-dental.co.jp