

GUTTA PERCHA POINTS PRO-ENDO III

# プロエンドIII

腰の強さと折れにくさを有したガッタパーチャポイント!  
**根管内へのスムーズな挿入を実現!!**


## メインポイント



## アクセサリポイント



## 明瞭なX線造影性

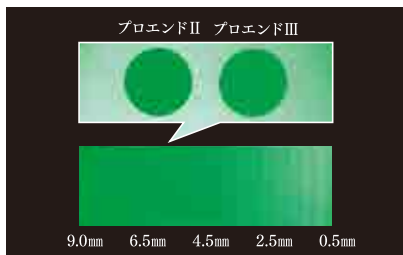

### X線不透過率

プロエンドII  
 アルミニウム6.0mm  
 相当以上


プロエンドIII  
 アルミニウム6.0mm  
 相当以上

試験片厚2.0mm  
 アルミニウムステップエッジ 0.5mm×18段

従来品と同等の明瞭なX線造影性を有します。

※自社試験による


## 折れにくさが向上

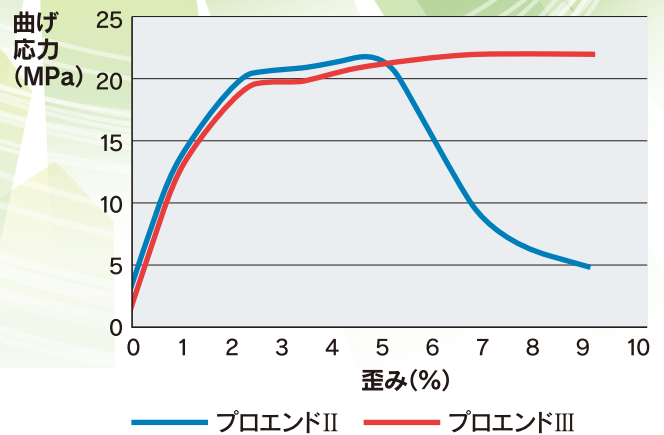

従来品は5%の歪みで亀裂が生じたが、プロエンドIIIは10%歪んでも亀裂が生じず、折れにくさが向上したため、より差し込みやすくなりました。

※自社試験による

## 操作性が向上

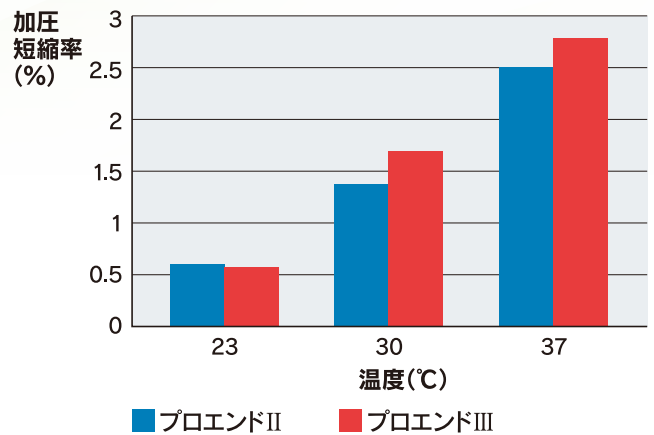

従来品よりも温度に応じた加圧短縮率が向上しており、常温付近では適度なコシを有し、体温に近い温度帯では根管内での側方加圧がしやすくなっております。

※自社試験による



**形態表** 国際規格のカラーコード採用。

実寸大 ※寸法には若干の誤差がございます。

## メインポイント

#15	#20	#25	#30	#35	#40	#45	#50	#55
#60	#70	#80	#90	#100	#110	#120	#130	#140

## アクセサリーポイント

FS	FM	FL	S	M	L	TS	TM	TL
細小	細中	細大	標小	標中	標大	太小	太中	太大

## メインポイント

## アクセサリーポイント



## ■メインポイント

	規 格	包 装
単 品	#15 #20 #25 #30 #35 #40 #45 #50 #55 #60 #70 #80 #90 #100 #110 #120 #130 #140	各120本入/ケース 標準価格 <b>¥1,800</b>
アソート	#15~#40 #45~#80 #90~#140	各120本入/ケース (各規格20本入) 標準価格 <b>¥1,800</b>

## ■アクセサリーポイント

	規 格	包 装
単 品	細小・細中・細大 標小・標中・標大 太小・太中・太大	各120本入/ケース 標準価格 <b>¥1,800</b>
アソート	細混・標準混・太混	各120本入/ケース (細・大30本・中60本入) 標準価格 <b>¥1,800</b>

●ご用命は…



製造販売元  
**山八歯材工業株式会社**  
〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1  
TEL (0533) 57-7121 FAX (0533) 57-1764  
Home Page <https://yamahachi-dental.co.jp/>  
E-mail [box@yamahachi-dental.co.jp](mailto:box@yamahachi-dental.co.jp)