

歯科複模型用シリコン印象材(付加型)

山八歯材
campaign

Correcsil

コレクシル

キャンペーン期間 | 2025. 9/1 mon → 9/30 tue

歯科複模型用ゴム質弾性印象材料
歯科複模型用シリコン印象材(付加型)

コレクシル

23B1X10001C06004

一般医療機器



2kg

標準価格(税別)

¥16,500

▶ 特別価格

10kg

標準価格(税別)

¥80,000

▶ 特別価格

特徴

- 流動性が高いため細部にも流し込みやすく良好な再現性を有しております。
- 2種類の硬さを用意することによりお好みの用途に合わせた選択が可能です。
- コレクシル(ノーマル) / コレクシル プラス(ハード)
- 優れた寸法安定性 / 操作猶予時間: 約5分
硬化時間: 約30分(23℃)

歯科複模型用ゴム質弾性印象材料
歯科複模型用シリコン印象材(付加型)

コレクシル プラス

23B1X10001C06003

一般医療機器



2kg

標準価格(税別)

¥20,000

▶ 特別価格

10kg

標準価格(税別)

¥89,000

▶ 特別価格

用途

耐火模型・歯科用模型製作(多目的に使用可能)

物性	コレクシル	コレクシル プラス
引張り強さ (MPa)	1.4	3.0
破断伸び (%)	723	400
硬さ (shore)	16	26
引裂き強さ (N/mm)	2.5	7




鑄造床耐火模型



ポーセレンラミネートベニア耐火模型



ポーセレンインレー耐火模型

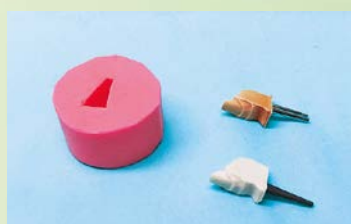

ジャケット冠複模型



YAMAHACHI DENTAL MFG., CO.



シリコン表面滑性剤

TK SILICONE CLEANER

T K シ リ コ ン ク リ ー ナ ー

キャンペーン期間 | 2025. 9/1 mon → 9/30 tue

シリコン表面滑性剤

TKシリコン クリーナー

模型材の流れをスムーズにし気泡の混入を防ぎます。

- シリコン印象・シリコン複印象へ模型材を流し込む時に!!
- アルジネート印象へ模型材を流し込む際にも効果を発揮!!
- ワックスパターンの表面処理に!!

TKシリコンクリーナー 噴霧効果試験

① TKシリコンクリーナー未使用



模型の細部に気泡混入がいくつかみられる。

② TKシリコンクリーナー使用



シリコン表面が滑性化し、模型への気泡混入を防止できた。

使用方法

シリコンの表面から約20cm離して噴霧して下さい。エアー等を用いますと乾燥時間を短縮できます。

※ワックスパターンクリーナーとしてもお使い頂けます。



スプレータイプ(LPG)180ml

標準価格(税別)

¥1,500▶

特別価格

※ご注文＆お問い合わせは、お取引ディーラー様にご用命ください。

●ご用命は…



製造販売元

山八歯材工業株式会社

〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1

TEL(0533)57-7121 FAX(0533)57-1764

Home Page <https://www.yamahachi-dental.co.jp/>

E-mail box@yamahachi-dental.co.jp